

Quorum

Inteligencia de base instalada para equipos de campo, con IA en el dispositivo y sin servidor central.



Philips · Base instalada

Tether · QVAC Psy

Desafío General

TANEBI

Cada visita revela la base
instalada de un cliente.
Y se pierde en notas y memoria.

Captura manual

Lenta, distinta en cada persona y casi siempre a medias.

Reportes duplicados

Varias personas describen el mismo equipo y nadie sabe cuál dato es el bueno.

Sin señal, datos sensibles

En el hospital no hay conexión estable y la información del cliente no debe salir a la nube.

Quorum convierte una visita dictada en **datos confiables**.

HABLA

Dicta la visita al salir del hospital.

CONFIRMA

VisionPsy lee la placa del equipo.

CONVERGE

El equipo sincroniza sin servidor central.

REGISTRO · EN ESTE DISPOSITIVO

Hospital DemoCare Pacific

Ciudad de Panamá, Panamá

Resonador magnético 01

Philips · Ingenia 1.5T · 9 años · foto de placa

Confirmado

Resonador magnético 02

Marca por confirmar · unos 7 años

Estimado

Tomógrafo

Cambiado el año pasado · 1 año

Reportado

CM

AR

Conectado con 1 dispositivo

De laptop a laptop, sin servidor central

● En línea

Todo el flujo corre **en la laptop.**



VISIONPSY NANO · 460M · Q8_0

95%

de los campos de la placa, bien leídos.
En la laptop y sin internet.

99%

de los Confirmados, correctos

2,3 s

por placa

30


placas de prueba



MARCA	Philips	Confirmado
MODELO	Ingenia 1.5T	Confirmado
SERIE	45021	Confirmado
FABRICACIÓN	2017-03	Confirmado

visionpsy-nano-460m · en este dispositivo · nunca se delega

Cada laptop es un nodo. **No hay servidor central.**

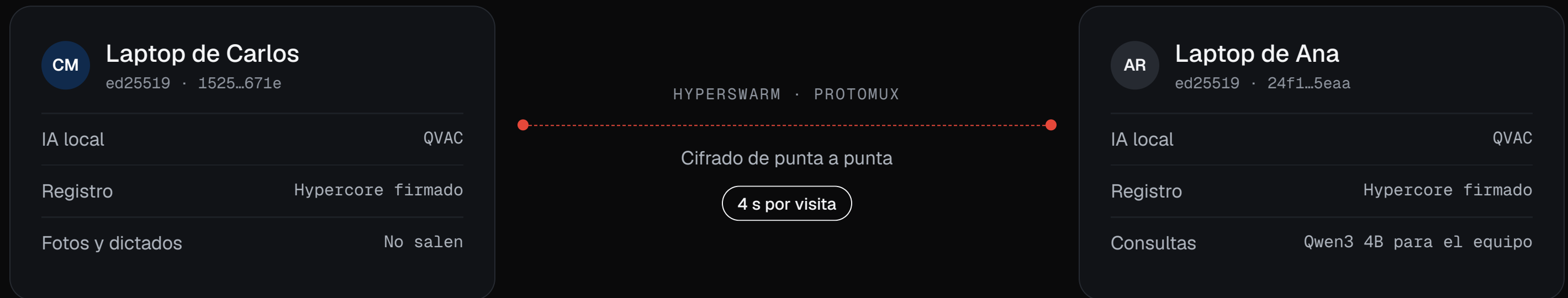

Se encuentran solos

Con el código secreto del equipo. Nadie más entra.

Todo va firmado

Nadie puede escribir en el registro de otro.

Consultas delegadas

Un par responde con Qwen3 4B. Si no está, corre en la propia laptop.

La confianza no es una caja negra.



Duplicados con criterio

Mismo cliente, misma modalidad y personas distintas. Quorum pregunta antes de unir.

Oportunidades a la vista

Equipos en edad de renovación y datos sin verificar hace más de 180 días.

Medido en una laptop, **no en la nube.**

14%

de error por palabra al transcribir

`parakeet-tdt-0.6b · Q8_0`

96%

de campos extraídos en dictados nuevos

`qwen3-1.7b · Q4 + reglas`

95%

de campos leídos en 30 placas

`visionpsy-nano-460m · Q8_0`

80/80

filtros correctos en consultas

`qwen3-1.7b + reglas`

4 s

para que una visita llegue a otra laptop

`hyperswarm + hypercore`

0

inferencias en APIs remotas

`todo con @qvac/sdk local`

`Apple M4 · 16 GB · @qvac/sdk 0.19 · cada inferencia registrada en perf.jsonl`

Empieza con un equipo de campo. **Crece a la base instalada de la región.**

FASE 1 · PILOTO

Un equipo de servicio dicta sus visitas

Sin servidores ni integraciones. Una laptop por persona y el código del equipo.

FASE 2 · PAÍS

La base instalada se mantiene sola

Cada visita confirma o corrige lo que se sabe, con testigos y confianza.

FASE 3 · REGIÓN

Ventas y renovaciones con datos

Oportunidades de renovación y equipos sin verificar, listos para priorizar visitas.

PARA QUIÉN

Ingenieros de servicio

Vendedores

Especialistas de producto

Dictas lo que viste.
VisionPsy lo confirma.
El equipo converge sin servidor.

REPOSITORIO

github.com/nanoulloa/quorum-qvac

PROBARLO EN LOCAL

`npm install · npm run dev`

EQUIPO

Tanebi